

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Tapones para los Oídos de Silicona



DESCRIPCIÓN

Los tapones de silicona sirven para proteger los oídos del agua, especialmente en actividades acuáticas como natación, ducha o baño. También pueden utilizarse para reducir el ruido ambiental o para proteger los oídos de la entrada de polvo u otros elementos externos. Los tapones de silicona se adaptan al canal auditivo y crean un sello que ayuda a prevenir la entrada de agua u otros materiales en el oído.


ESPECIFICACIONES

Empaque / Referencias	- IU-TAOSIL-6 Pack de 6 Unidades (3 Pares) - IU-TAOSIL-12 Pack de 12 Unidades (6 Pares)
-----------------------	---

EAN	7427254527634 (3 pares) 7427254527641 (6 pares)
-----	--

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lávese las manos para evitar la introducción de bacterias en el canal auditivo.
2. Tire suavemente del lóbulo de la oreja hacia abajo para abrir el canal auditivo.
3. Inserte el tapón en el canal auditivo y manténgalo en su lugar durante unos segundos para que se expanda y selle correctamente.
4. Ajuste si es necesario: Si siente que el tapón no sella correctamente o no es cómodo, retírelo y vuelva a intentar comprimiéndolo y colocándolo de nuevo.
5. Para retirarlo, simplemente pellízquelo suavemente y hale hacia atrás.

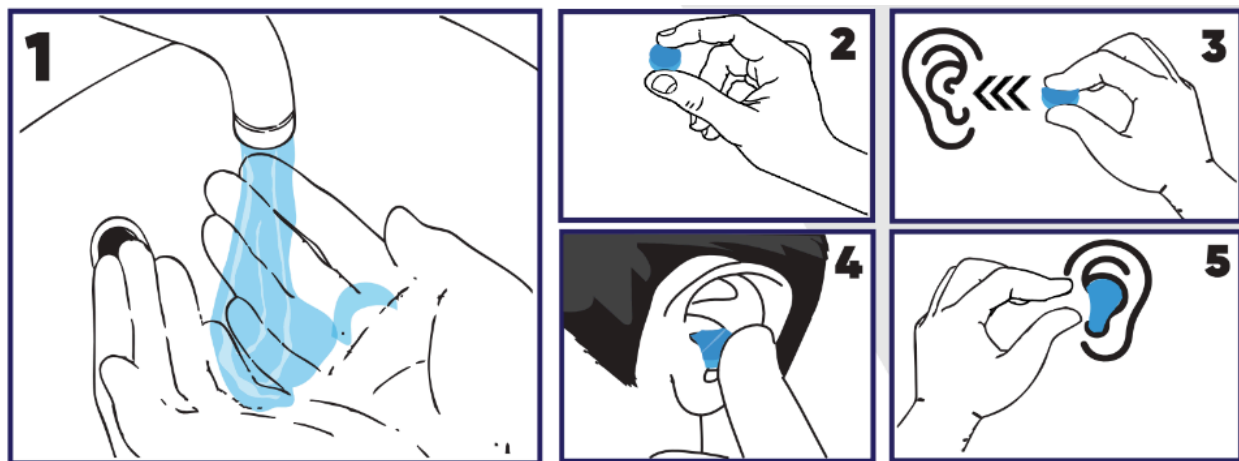

BENEFICIOS

1. Protege tus oídos contra el ruido excesivo.
1. Ayudar a prevenir daños en la audición.
2. Reduce la posibilidad de desarrollar problemas como la pérdida auditiva.
3. Útiles para reducir el ruido ambiental en diferentes actividades.

ADVERTENCIA

1. Manténgalo alejado de bebés y niños pequeños.
2. No introduzcas los tapones para los oídos demasiado profundamente en el canal auditivo, ya que esto puede causar molestias o lesiones.
3. No uses tapones para los oídos si tienes una infección en el oído o cualquier otro problema de salud en el canal auditivo, ya que esto puede empeorar la condición.
4. No compartas tapones para los oídos con otras personas para prevenir infecciones.