


FICHA TÉCNICA TEST ANTIGENOS AmonMed COVID19

PRODUCTO	Prueba rápida de antígenos para la detección de COVID19 en muestras de saliva. (Oro Coloidal)
CLASIFICACIÓN	IVD (Autodiagnóstico)
MARCA	AmonMed
REFERENCIA	CG01Ag-01S-ST
FABRICANTE	Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd.
IMPORTADOR	PHARMASUR 2000 SL
CÓDIGO NACIONAL	207549.8

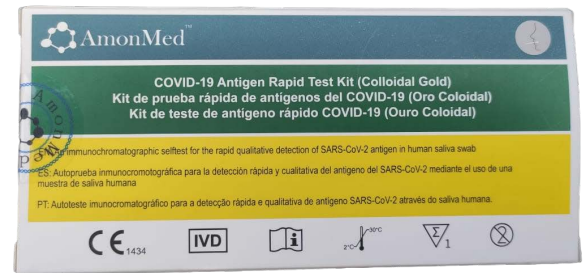

DESCRIPCIÓN

El Test Antígenos AmonMed COVID19 es una prueba rápida para autodiagnóstico basada en técnicas inmunocromatográficas de flujo lateral y diseñada para la detección cualitativa rápida del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, en muestras de saliva. Virus causante de la COVID19.

El casete de prueba se basa en la técnica de inmunoensayo a través de la reacción antígeno- anticuerpo específica, así, al contener los anticuerpos frente al SARS-CoV-2, da lugar a la línea roja visible en caso de estar infectado.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico y rápido.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO DEL KIT	Instrucción de uso en castellano (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (1 ud./Kit); Tubo flexible de tampón de extracción con solución y tapa (1 ud./Kit); Hisopo bucal en Envase Individual Estéril (1 ud./kit)
TIEMPO DE DETECCIÓN	Resultado en 15-20 minutos desde la colocación de la muestra extraída en la placa reactiva.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
VIDA ÚTIL	18 meses desde la fecha de fabricación
CANTIDAD	1 tests/Kit
ESPECIFICIDAD	COVID-19: 99%
SENSIBILIDAD	COVID-19: 96,55%
NORMATIVA	Directiva 98/79/CE

ADVERTENCIAS

Leer las instrucciones antes de usar y seguir cuidadosamente todos los pasos indicados. No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.

